




Captair Store

开普泰 思拓

净气型储药柜

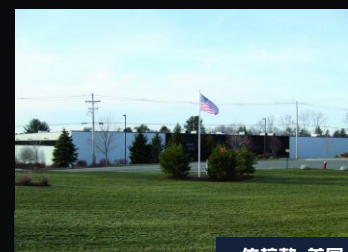

依拉勃 美国



依拉勃 法国



依拉勃 中国



依拉勃 西班牙



依拉勃 马来西亚

依拉勃北京联络处

北京市朝阳区西坝河西里28号
国际英特公寓B座17E
电话:010-6447 7179 010-6447 7566
传真:010-6447 6991
邮箱:erlab-beijing@erlab.com.cn

依拉勃广州联络处

广州市天河区珠江新城兴民路221号
中海花城湾B3-1404
电话:020-3801 7707 020-3801 7709
传真:020-3801 7703
邮箱:erlab-guangzhou@erlab.com.cn

依拉勃成都联络处


成都市锦江区滨江东路158号
都会风尚一单元1805室
电话:028 8312 2153
传真:028 8312 2153
邮箱:erlab-chengdu@erlab.com.cn

依拉勃青岛联络处

青岛市市北区黑龙江路2号
乙号万科中心B座1810室
电话:0532 8093 5939
传真:0532 8093 5936
邮箱:erlab-qingdao@erlab.com.cn



全球领先

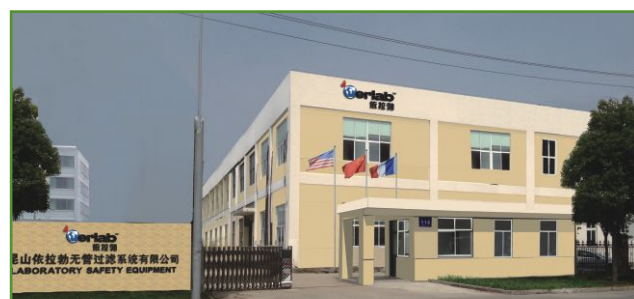

昆山依拉勃无管过滤系统有限公司
江苏省昆山市开发区风琴路118号
邮编:215334
电话:0512-5781 4081 0512-5781 4085
传真:0512-5781 4082
邮箱:sales.china@erlab.com.cn

Erlab China-2016-10-01



祛除有毒气体 防止吸入危害



www.erlab.com.cn

免费服务热线:400-666-5781
www.erlab.com.cn

图片, 照片和技术参数仅供参考, 如有改变恕不另行通知

Captair Store
开普泰 思拓
shelf 812

容量: 10 瓶 (每瓶一公升)

■ 标准配件



把手
方便更换过滤器



可复写式标贴
提示过滤器
安装日期



空气挡板
气流更好进入



盛水盘
容量1 X 2 升
附带吸收垫

为什么选择 shelf 812 药品暂存架？

任何可能散发出来的化学气体都应立即从源头上解决掉，吸入少量化学有毒物质不会立即看到影响。但每天的积累，在多年后却会引起多种重症，根据美国的一项研究表明：(OSHA, 29 CFR Part 1910 - January 31st, 1990 Final rules from page 3303),**实验室人员寿命比平均值短10年!**
shelf 812经济实惠，操作简便，给使用者及时全面的保护，因**shelf 812**为敞开开放式，所以每天使用完化学药品后要将储存容器移至封闭式的储药柜中(思拓福 834 或 **ministore 822**)，以避免化学气体扩散。

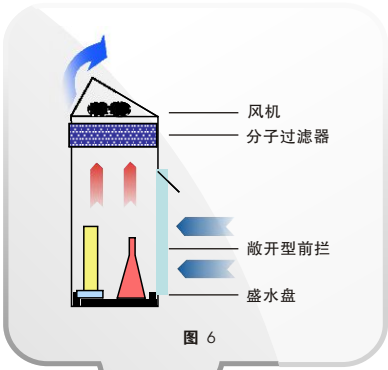


图 6



shelf 812药品暂存架

shelf 812药品暂存架配有一个风机和一个分子过滤器（图6）用于过滤化学品容器中散发的有毒气体。敞开式前门设计以方便用户放置容器到柜中。风机（超静音，45 dBA）将室内气体抽进柜内。有毒化学气体随气流带入分子过滤器后被安全过滤（过滤效率遵照中国行业标准JG/T385-2012，见第4页）过滤后，洁净空气重返室内。一台**shelf 812**药品暂存架可随时随地安装，只需插上标准电源插座，即可运行！它既可直接安放在台面上，也可装有支架，更可固定在墙上。

shelf 812的主要材质为镀锌钢板，双面抗酸碱的环氧聚酯喷涂。

日用型药品暂存架

■ 可选配件



桌面型
Ref.: 812 A




加装底座型
Ref.: 812 B



壁挂型
Ref.: 812 C


系列型号

shelf 812A

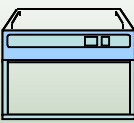


(mm)	L	D	H
内部	738	188	348
外部	821	280	582

shelf 812B

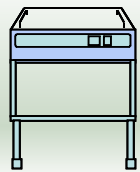

(mm)	L	D	H
内部	738	188	348
外部	821	310	792

shelf 812C

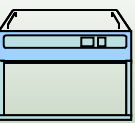

(mm)	L	D	H
内部	738	188	348
外部	821	295	582

技术参数

CE 认证

音量	45 dBA
空气处理量	75 m³/h
空气交换率	25 times/min
电压/频率	220 V/50 Hz
消耗功率	20 Watt
电流	0.17 A

ministore 822

容量: 45 瓶 (每瓶一公升)

■ 标准配件



隔板
隔离非兼容性化学品



可复写式标贴
提示过滤器
安装日期



可调层板
2片层板



盛水盘
容量1 X 2 升
附带吸收垫
(仅镀锌钢板
系列配备)



滑动门
带锁

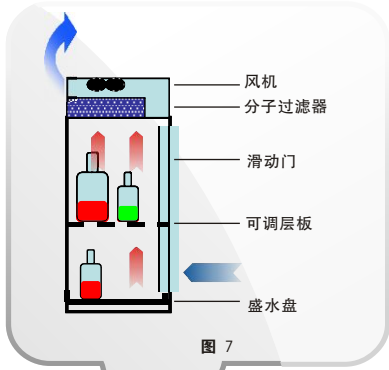


图 7



ministore 822 B净气型迷你储药柜

ministore 822储药柜配有一个风机和一个分子过滤器（图7），用于过滤化学品容器中散发的有毒气体。带有2扇亚克力滑动门，带锁，配有2片可调层板及2个隔离室以方便用户分开存放非兼容性化学品。风机（超静音，45 dBA）将室内气体吸入柜内。有毒化学气体随气流带入分子过滤器后被安全过滤(过滤效率遵照中国行业标准JG/T385-2012，见第4页),过滤后，洁净空气重返室内。一台**ministore 822**迷你储药柜可随时随地安装，只需插上标准电源插座，即可运行！它既可直接安放在台面上，也可装有支架，更可固定在墙上或放在操作台面下。

ministore 822的主要材质为镀锌钢板，双面抗酸碱的环氧聚酯喷涂。
ministore 822/PP的主要材质为聚丙烯，头罩材质为镀锌钢板，双面抗酸碱的环氧聚酯喷涂。

小型净气型储药柜

适合中期储存


■ 可选配件



桌面型
Ref.: 822 A



加装底座型
Ref.: 822 B

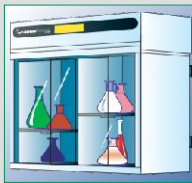


壁挂型
Ref.: 822 C



桌下型
Ref.: 822 D


系列型号

ministore 822A
ministore 822A/PP

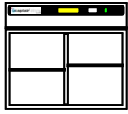


(mm)	L	D	H
内部	753	322	519
外部	819	354	725

ministore 822B
ministore 822B/PP

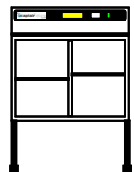

(mm)	L	D	H
内部	753	322	519
外部	819	435	911

ministore 822C
ministore 822C/PP

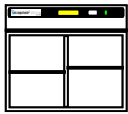

(mm)	L	D	H
内部	753	322	519
外部	819	372	705

ministore 822D
ministore 822D/PP



(mm)	L	D	H
内部	753	322	519
外部	819	354	725

技术参数

CE 认证

音量	45 dBA
空气处理量	75 m³/h
空气交换率	9.9 times/min
电压/频率	220 V/50 Hz
消耗功率	20 Watt
电流	0.17 A



Type F1


可选过滤器	气体
有机为主 (无机次之)	2F1 AS
有机和无机气体	2F1 BE



Type F1

可选过滤器	气体
有机气体为主 (无机次之)	2F1 AS
有机和无机气体	2F1 BE

文拓普 502
开拓普 V 201

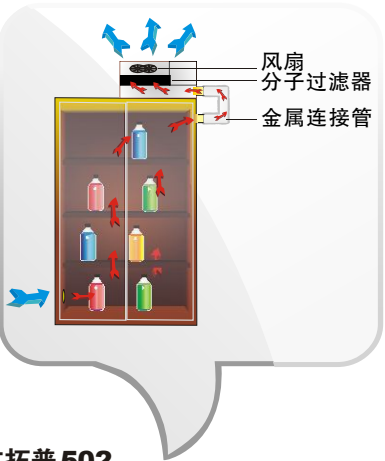

文拓普 502


化学品防火安全储存柜
专用过滤装置

可选配件



Venticode
过滤报警器

视听报警器用来提醒过滤器是否饱和（针对有机气体）

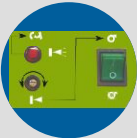


风机失灵报警器

监测通风系统正常运转

可选过滤器

有机为主 无机次之	F2 AS
有机和无机气体	F2 BE

防火柜过滤装置

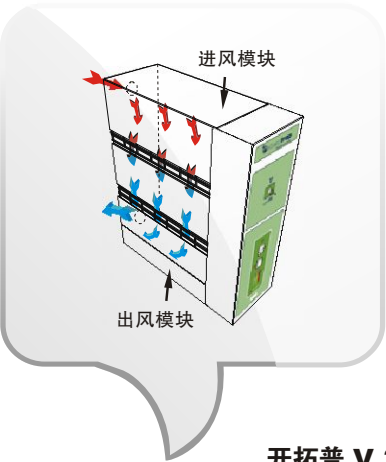

开拓普 V 201

可选配件



过滤器饱和和报警器

视听报警器用来提醒过滤器是否饱和(针对有机气体)。



风机失灵报警器


监测通风系统是否正常运转。

可选过滤器

有机为主 无机次之	2F1 AS
有机和无机气体	2F1 BE

桌下型防火柜过滤装置

标准配件

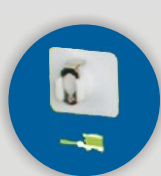

检测端口

连接过滤器出气孔
来检测过滤器饱和
状况



金属连接管

用于连接
文拓普 502
与存储柜

尺寸

(mm) L D H


外部 570 X 390 X 270

技术参数

CE 认证

音量	57 dBA
空气处理量	75 m ³ /h
电压/频率	220 V/50 Hz
消耗功率	65 Watt
最大电流	0.8 A

标准配件

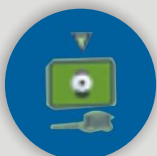

饱和和检测端口

利用专门的检测棒和检测泵(需购买)
可检测过滤器饱和状况。

尺寸

(mm) L D H

V201 200 X 537 X 605

技术参数

CE 认证

音量	55 dBA
空气处理量	75 m ³ /h
电压/频率	220 V/50 Hz
消耗功率	19 Watt
最大电流	0.19 A
伸缩管尺寸	1 米 (Ø57 mm)
法兰尺寸	Ø62 mm

开普泰 ESP（依拉勃安全流程，见第13页），同时适用于开普泰思拓净气型储药柜的销售。为确保所选用的过滤器能够有效吸附所存放的化学品的和其兼容性，恳请您填写依之间问卷，问卷将被传送到我司法国应用实验室，它将帮助我们推荐给您适用的过滤器和储药柜。依之间流程需花费1-2天时间。

N°	化学品名称 A	液体(L) 粉末(P) B	容器类型 C	容器容量 D	容器数量 E
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

公司名称:		部门:	
操作者名称:			
地址:			
邮编:		城市:	
电话:		传真:	
E-mail:		日期:	

怎样填写 aliQuest 问卷？
依之间

- A 化学名称:实验操作中使用的化学名称，如果是学名，我们需要您提供该化学产品的材质说明 (MSDS)
- B 液体 L/粉末P:如是液体，请填写L；如是粉末，请填写P
- C 容器种类: 使用频率高的容器如烧瓶，试管，漏斗，大烧杯等...
- D 容器容量: 说明容器的容量，如0.5升，1升，5升...
- E 容器数量: 说明需要储存的容器数量

* aliQuest 问卷也可在线填写: www.erlab.com.cn
依之间